



ALM 

# TPN ORDER PROGRAM

# LOGIN SCREEN:


- As many users as needed can be defined.
- User accounts for staff with different tasks can be defined.
- User accounts for different hospitals can also be added.



Admin  
Admin  
Asiye KÖSEOĞLU  
Ecz. Gökhan Aktaş  
Erhan KARAASLAN  
Esra SEZER  
Esra TAŞ  
Havva UZUN  
Kazım DARKA  
Kübra DEMİR  
Modikal Park Hastanesi  
Merve ÇINCIK  
Merve SAVAŞ  
Tokat Devlet Hastanesi

# MAIN SCREEN:

- The main screen where you switch between different windows to use the system.

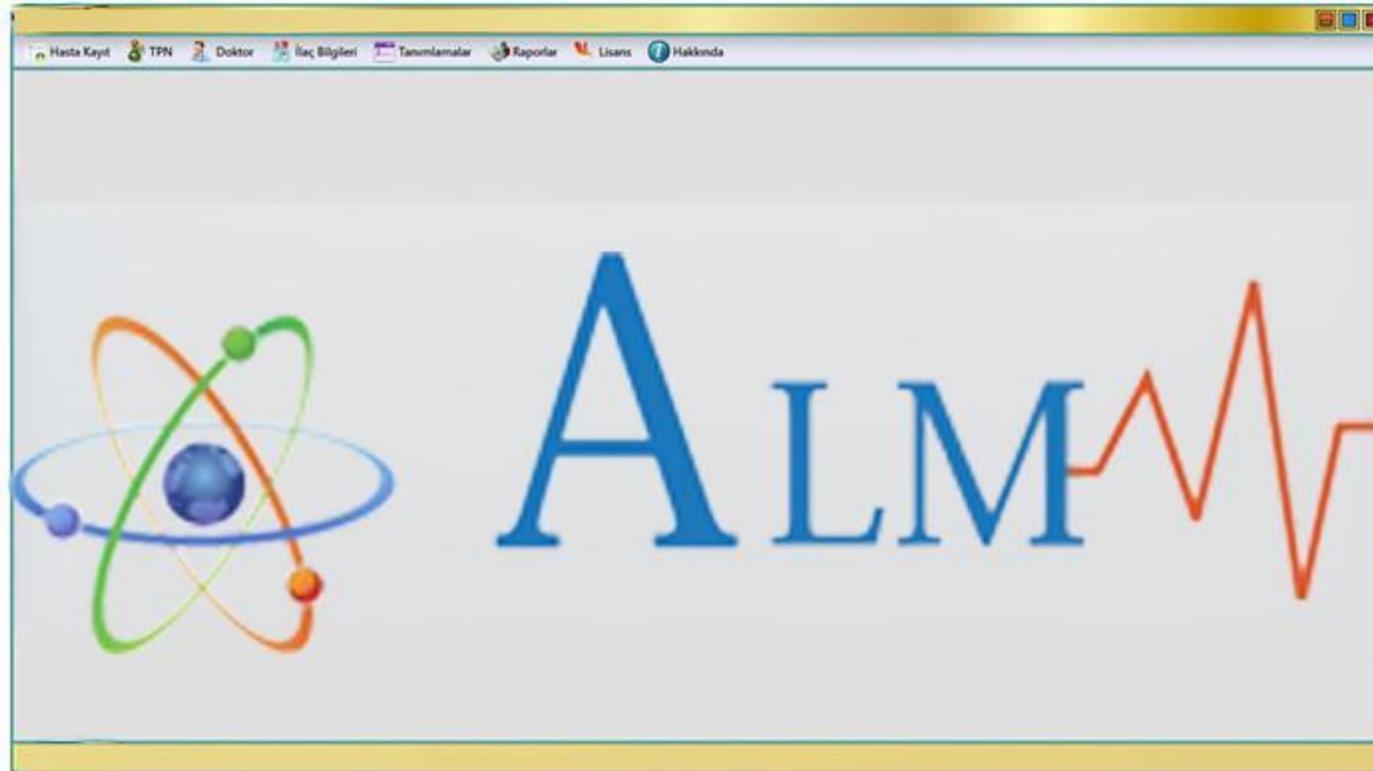

# PATIENT REGISTRATION SCREEN:

- New patient registration screen.
- This is where information and parameters such as the patient's first name, last name, birth weight, department, and doctor are entered.

SN	Dosya No	Ad	Soyad	TC Kim. No	Doğum Tarihi	Kuvöz No	Kan Gr.
1	1522313	ALJ KARAN	KOÇ		10.07.2025		
2	1512936	ALMLA BEGOM	GÜNBEY		21.08.2025		
3	1518301	ASEL LINA	ŞAHİNER		29.06.2025		
4	1510907	AYSIMA	AKDAŞ		26.04.2025		
5	1519544	BEBEK	ÖZGE ARMAĞAN		27.05.2025		
6	1528038	BEBEK	ABAK		12.08.2025		
7	1526656	BEBEK	ACAR		03.08.2025		
8	1514397	BEBEK	ADALI		16.05.2025		
9	1529093	BEBEK	AKBULUT 1		17.08.2025		
10	1514660	BEBEK	ALTINŞIK		18.05.2025		
11	1515268	BEBEK	ARMAĞAN		23.05.2025		
12	1527361	BEBEK	ARPAÇOĞLU		07.08.2025		
13	1507614	BEBEK	ARŞAN 2		14.03.2025		
14	1511643	BEBEK	ARSLAN		25.04.2025		
15	1521446	BEBEK	ARSLAN		03.07.2025		
16	1516424	BEBEK	ARSLAN		03.06.2025		
17	1507613	BEBEK	ARSLAN 1		14.03.2025		
18	1518260	BEBEK	ATIŞ		13.06.2025		
19	1521792	BEBEK	AYDIN		06.07.2025		
20	1506525	BEBEK	AYDOĞDU		06.03.2025		
21	1514456	BEBEK	AYGÜN		17.05.2025		
22	1518693	BEBEK	AYVAZ		18.06.2025		
23	1510225	BEBEK	BALCI		11.04.2025		

# PATIENT REGISTRATION SCREEN:

- Section for inpatients.

Hasta Kayıt TPN Doktor İlaç Bilgileri Tanımlamalar Raporlar Lisans Hakkında

Bebek Bilgileri

Doktor: Kazım DAFKA Liste Şekli: Yatan Bebekler

SN	Dosya No	Ad	Soyad	TC Kiml. No	Dğm Tarihi	Kuvöz No	Kan Gr.
1	1536017	BEBEK	ÇAĞLAYAN		05.10.2025		
2	1535525	BEBEK	ÇAĞLI		29.09.2025		
3	1536717	BEBEK	EKİNCİ		05.10.2025		
4	1536454	BEBEK	ERASLAN 1		03.10.2025		
5	1536457	BEBEK	ERASLAN 2		03.10.2025		
6	1534979	BEBEK	GENÇ 1		24.09.2025		
7	1534980	BEBEK	GENÇ 2		24.09.2025		
8	1534813	BEBEK	KAPLAN 1		23.09.2025		
9	1534815	BEBEK	KAPLAN 2		23.09.2025		
10	1535227	BEBEK	KAZANIR		25.09.2025		
11	1536403	BEBEK	KÖSE		02.10.2025		
12	1536281	BEBEK	ÖZ		02.10.2025		
13	1535345	BEBEK	TOYDEMİR		27.09.2025		

Dozuya No: 1536017  
Doktor: Kazım DAFKA  
Hasta Türü: Yenidoğan  
Servis: Yeni Doğan Yoğun Bak  
Kuvöz:   
T.C. Kimlik No:   
Adı: BEBEK  
Soyadı: ÇAĞLAYAN  
Doğum Tarihi: 05.10.2025 10:49:20  
Kayıt Tarihi: 05.10.2025 10:49:20  
Taburcu Tarihi:   
Doğum Kilonu: 2.840 Gram  
Bağ Çevresi: 0 Cm  
Dğm. Boy: 0 Cm  
Kan Grubu:   
Notlar:   
Yeni Guncelle Sil

# PATIENT REGISTRATION SCREEN:

- Section for discharged patients.

Hasta Kayıt TPN Doktor İlaç Bilgileri Tanımlamalar Raporlar Lisans Hakkında

Bebek Bilgileri

Doktor Kazım DAFKA Liste Şekli Taburcu Olanlar

S/N	Dozuya No	Ad	Soyad	TC Kim. No	Djım Tarihi	Kuvöz No	Kan Gr.
1	1522313	ALI KARAN	KOÇ		10.07.2025		
2	1512936	ALMLA BEGOM	GONBEY		21.08.2025		
3	1518301	ASEL LINA	ŞAHNER		29.06.2025		
4	1510907	AYSIMA	AKDAŞ		26.04.2025		
5	1519544	BEBEK	(ÖZGE) ARMAĞAN		27.05.2025		
6	1528038	BEBEK	ABAK		12.08.2025		
7	1526656	BEBEK	ACAR		03.08.2025		
8	1514397	BEBEK	ADALI		16.05.2025		
9	1529093	BEBEK	AKBULUT 1		17.08.2025		
10	1514660	BEBEK	ALTINIŞIK		18.05.2025		
11	1515268	BEBEK	ARMAĞAN		23.05.2025		
12	1527361	BEBEK	ARPAÇOĞLU		07.08.2025		
13	1507614	BEBEK	ARSAN 2		14.03.2025		
14	1511643	BEBEK	ARSLAN		25.04.2025		
15	1521446	BEBEK	ARSLAN		03.07.2025		
16	1516424	BEBEK	ARSLAN		03.06.2025		
17	1507613	BEBEK	ARSLAN 1		14.03.2025		
18	1518260	BEBEK	ATIŞ		13.06.2025		
19	1521792	BEBEK	AYDIN		05.07.2025		
20	1506525	BEBEK	AYDOĞDU		06.03.2025		
21	1514456	BEBEK	AYGÜN		17.05.2025		
22	1519693	BEBEK	AYVAZ		18.06.2025		
23	1510225	BEBEK	BALCI		11.04.2025		

Dozuya No: 1522313  
Doktor: Kazım DAFKA  
Hasta Türü: Yenidoğan  
Servis: Yeni Doğan Yoğun Bak  
Kuvöz: -  
T.C. Kimlik No: -  
Adı: ALI KARAN  
Soyadı: KOÇ  
Doğum Tarihi: 10.07.2025 00:00:00  
Kayıt Tarihi: 10.07.2025 00:00:00  
Taburcu Tarihi: 14.07.2025  
Doğum Kilosu: 2.710 Gram  
Bağ Cerrahi: 0 Cm  
Djım Boy: 0 Cm  
Kan Grubu: -  
Notlar: -

Yeni Güncelle Sil

# MANUAL ORDER ENTRY SCREEN:

- A screen where manual order amounts are entered without calculating the drug amount per weight.

The screenshot displays the 'TPN Order Entry Screen (MANUEL)' interface. The top navigation bar includes 'Hasta Kayıt', 'TPN', 'Doktor', 'İlaç Bilgileri', 'Tanımlamalar', 'Raporlar', 'Lisans', and 'Hakkında'. The main window title is 'TPN Order Giriş Ekranı... (MANUEL)'. The patient information section shows 'Hasta: bebek deneme', 'Dozay: 123456', and 'Düny. Tth: 19.08.2024'. The date is '6 Ekm. 2025 Pazartesi'. The 'Soluşyon Bilgileri' section includes 'Doğun Ağırlığı: 1.500 Gr', 'Bağ Çermezi: 0 Cm', 'Güncel Ağırlığı: 0 Gr', 'Boy: 0 Cm', 'Sıvı Hacmi: 0,00 ml/kg', 'Order Türü: Normal', and 'Toplam Hacim: 0,00 ml'. The 'İçerik' section lists various nutrients with their 'Toplam', 'Kg Bgn.', and 'U' values. The 'İlaç Adı' table lists drugs such as 'Dextroz 1,20', 'Potasyum Fosfat', 'Potasyum Klorür 1,7,5', 'Magnezyum Sülfat 1,15', 'Cemevit', 'Sodyum Bikarbonat 1,8,4', '1,3 NaCl', '1,10 Pritense', 'Dextroz 1,50', 'Dextroz 1,30', 'Dextroz 1,20', 'Dextroz 1,10', 'Dextroz 1,5', 'Distile Su', 'Heparin', 'Calcium Pıskan 1,10', and 'Omegaven 1,10'. The 'Ek Açıklamalar' section is empty. The bottom status bar shows 'Order Hazırlama Çarpıcı (°) 1,25', 'Toplam Soluşyon 0,00', and '0,00 (\*)'.

# MANUAL ORDER ENTRY SCREEN:

- After the order is entered, the program automatically calculates osmolarity, precipitation, speed, volume, and many other parameters, displaying them on the screen.

The screenshot displays the 'TPN Order Giriş Ekranı... (MANUEL)' window. The patient information includes 'Hasta: bebek deneme', 'Dozay: 123456', 'Dğn. Tih: 15.08.2024', and '6 Ekim 2025 Pazartesi'. The 'Sölyşyon Bilgileri' section shows 'Doğuş Ağırlığı: 1.500 Gr', 'Güncel Ağırlığı: 1500 Gr', 'Sıvı Hacmi: 127,47 ml/kg', and 'Toplam Hacim: 191,20 ml'. The 'İçerik' table lists various components like 'Kalsiyum (Ca)', 'Potasyum (K)', 'Sodyum (Na)', and 'Osmolarite' with their respective values. The 'İlaç Adı' table lists ingredients such as 'Choleic 1:20', 'Potasyum Fosfat', 'Potasyum Klorür 3,7,5', and 'Dekstroz 1:10'. The 'Ek Açıklamalar' section is currently empty.

İlaç Adı	Birim	İstenen Miktar (ml)	Dolacak Miktar (ml) (x1,25)	Elle Dolum
Choleic 1:20	g	8,00	10,00	<input type="checkbox"/>
Potasyum Fosfat	mEq	1,00	1,20	<input type="checkbox"/>
Potasyum Klorür 3,7,5	mEq	3,00	3,80	<input type="checkbox"/>
Magnezyum Sülfat 1:15	ml	0,20	0,20	<input type="checkbox"/>
Camelit	ml	1,00	1,20	<input type="checkbox"/>
Sodyum Bikarbonat 1:8,4	mEq	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
1:3 NaCl	mEq	20,00	25,00	<input type="checkbox"/>
1:0,9 NaCl	mEq	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
1:10 Pivane	g	40,00	50,00	<input type="checkbox"/>
Dekstroz 1:50	g	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
Dekstroz 1:30	g	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
Dekstroz 1:20	g	35,00	43,80	<input type="checkbox"/>
Dekstroz 1:10	g	80,00	100,00	<input type="checkbox"/>
Dekstroz 1:5	g	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
Distile Su	ml	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
Heparin	Unit	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
Calcium Pnöken 1:10	ml	3,00	3,80	<input type="checkbox"/>
Omegaven 1:10	g	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>

# AUTOMATIC ORDER ENTRY SCREEN:

- A screen where order amounts are entered by calculating the drug amount per weight.
- Old orders can be reviewed by clicking on them from the window on the left side.

The screenshot displays the 'TPN Order Entry Screen (OTOMATİK)' for patient 'BEREK ZADA'. The interface includes a menu bar at the top with options like 'Hasta Kayıt', 'TPN', 'Doktor', 'İlaç Bilgileri', 'Tanımlamalar', 'Raporlar', 'Lisans', and 'Hakkında'. Below the menu, patient details are shown: 'Yatan Bebekler', 'Hesab: BEREK ZADA', 'Diyadin No: 1453310', 'Kayıt Tarihi: 27.05.2024', 'Doğum Tarihi: 27.05.2024', and 'Tahsis Tarihi'. The main area is divided into three sections: 'Soluzyon Bilgileri' (Solution Information), 'İçerik' (Content), and 'İlaç Bilgileri' (Drug Information). The 'Soluzyon Bilgileri' section shows 'Doğum Ağırlığı: 1.100 Gr', 'Güncel Ağırlığı: 1.100 Gr', 'Sıvı Hacmi: 100,00 ml / kg', and 'Toplam Hacim: 110,00 ml'. The 'İçerik' section lists various components like 'Volume', 'Kalsiyum (Ca)', 'Sodyum (Na)', 'Potasyum (K)', 'Kalsiyum (Ca)', 'Fosfor (P)', 'Protein', 'Eser Element', 'Vitamin', 'Lipid', 'Magnezyum (Mg)', 'Dokütor', 'Dokütor Su', 'Çökeltme Faktörü', 'Osmolalite', 'Ca (mg) / P (mg)', 'Non-Protein Kalori', 'Nitrojen', and 'Non-Protein Kalori / Nitrojen'. The 'İlaç Bilgileri' section is a table with columns for 'İlaç Adı', 'Kullanılan Miktar (Birim)', and 'TPN Miktarı (ml)'. The table lists various drugs and their quantities, such as 'Cimoleic %20', 'Potasyum Fosfat', 'Potasyum Klorür %7,5', 'Magnezyum Sülfat', 'Cernevit', 'Sodyum Bikarbonat', '%3 NaCl', '%0,9 NaCl', '%10 Primense', 'Heparin', 'Calcium Picken %10', 'Omegaven %10', 'Dokütor 1,50', 'Dokütor 1,30', 'Dokütor 1,20', 'Dokütor 1,10', 'Dokütor 1,5', and 'Dokütor Su'. The bottom of the screen shows 'Order Hazırlama Çarpanı: 1,25', 'Toplam Soluzyon: 110,00', and '137,40'. There are also buttons for 'Keydet', 'İptal', 'Yazdır', and 'Etiket'.





# AUTOMATIC ORDER ENTRY SCREEN:

- The order output can be printed or saved as a PDF.

HASTA BİLGİLERİ	
Dünya Numarası : 1453310	Kayıt Tarihi : 27.05.2024
Doktor : KAZIM DAIKTA	Order Tarihi : 06.10.2025 15:40
Adı Soyadı : BEREN ZADA	Kim Grubu :
T.C. Kimlik No :	Doğum Tarihi : 27.05.2024
Doğum Kilosu : 1.550	Damar Yolu : Periferik
Akıl Kilo : 1.550	

TPN ORDER BİLGİLERİ	EK ORDER BİLGİLERİ
Glukoz %20	
3.00 g/kg 10.50 ml 10.50 ml	
Protein %10	
1.00 ml/kg 1.00 ml 1.00 ml	
Magnezyum Sülfat %15	
0.10 ml/kg 0.11 ml 0.11 ml	
Carvevit	
0.10 ml/kg 0.11 ml 0.11 ml	
Sodyum Bikarbonat % 8.4	
1.00 ml/kg 1.00 ml 1.00 ml	
%10 Potasyum	
1.00 g/kg 1.00 ml 1.00 ml	
Calcium Pektin %10	
4.00 ml/kg 4.00 ml 4.00 ml	
Dextroz %5	
11.48 ml 11.48 ml	
	Protein 3.00 gr / kg
	Non-Protein Kalori 36.36 Kcal / kg
	İtirojen 0.48 gr / kg
	Non-Protein İtirojen 75.75
	Dextroz İtirojen Hızı 1.62 mg / kg / dk
	Dextroz Konsantrasyonu 2.58 %
	Dextroz Hızı 456.7 ml/deniz

NOT: TPN 1,20 Kal Farkta Hazırlanacaktır. (Toplam : 137,43 ml)

Toplam Sodyum : 110,00 ml    Kg Başına Sodyum : 100 ml    Kg Başına Kal : 48,36 kcal    Hız : 4,58 ml/kg    Süre : 24 Saat

# AUTOMATIC ORDER ENTRY SCREEN:

- The order waiting for preparation is shown on the left side with color coding.

The screenshot displays the 'TPN Order Entry Screen (OTOMATİK)' for patient 'BEBEK ZADA'. The interface includes a menu bar at the top with options like 'Hasta Kayıt', 'TPN', 'Doktor', 'İlaç Bilgileri', 'Tanımlamalar', 'Raporlar', 'Lisans', and 'Hakkında'. Below the menu, patient details are shown: 'Bebek BEBEK ZADA', 'Dosya No 1453310', 'Kayıt Tarihi 27.05.2024', 'Doğum Tarihi 27.05.2024', and 'Taburcu Tarihi'. The main area is divided into three sections: 'Order Tarihi' (Order Date) on the left, 'Solüsyon Bilgileri' (Solution Information) in the middle, and 'İlaç Adı' (Drug Name) on the right. The 'Order Tarihi' section shows a list of orders with dates and times, color-coded by status (green for completed, yellow for pending). The 'Solüsyon Bilgileri' section shows a table of solution components and their quantities. The 'İlaç Adı' section shows a list of drugs with their quantities and TPN amounts. The 'Ek İlaç Bilgileri' (Additional Drug Information) section is currently empty.

Order Tarihi	Solüsyon Bilgileri	İlaç Adı	Kullanılan Miktar (Birim)	TPN Miktarı (ml)			
			Kg Başına	Toplam	İstemen	Çarpım	
06.10.2025 15:40	Doğum Ağırlığı 1.100 Gr	Ornolec %20	3,00	3,30	g	16,50	20,6
02.06.2024 10:22	Güncel Ağırlığı 1.100 Gr	Potasyum Fosfat	1,00	1,10	mEq	1,10	1,4
01.06.2024 12:04	Seri Hacmi 100,00 ml / kg	Magnezyum Sülfat %15	0,10	0,11	ml	0,11	0,1
31.05.2024 14:04	Toplam Hacim 110,00 ml	Cemevit	0,10	0,11	ml	0,11	0,1
30.05.2024 11:39		Sodyum Bikarbonat % 8,4	3,00	3,30	mEq	2,30	4,1
29.05.2024 11:56		%10 Premix	3,00	3,30	g	33,00	41,2
28.05.2024 13:55		Çalium Pnöken %10	4,00	4,40	ml	4,40	5,5
27.05.2024 14:47		Dextroz %5				51,48	64,4

İçerik	Toplam	Kg Bgn.	(%)
Hüme	110,00	100,00	ml
Hız	4,58	ml/Sa	
Kalori (kcal/Kg)	53,20	48,36	kcal
Sodyum (Na)	3,30	3,00	mEq
Potasyum (K)	1,10	1,00	mEq
Kalsiyum (Ca)	40,48	36,80	mg
Fosfor (P)	20,46	18,60	mg
Protein	3,30	3,00	gr 3,00
Esas Element	0,00	0,00	ml
Yağ	0,11	0,10	ml
Lipid	3,30	3,00	gr
Magnezyum (ml)	0,11	0,10	ml
Dekstroz	2,57	2,34	gr 2,34
Distile Su	0,00	0,00	ml
Çözüme Faktörü	24,4		
Osmolalite	450,7	Osm/L	
Ca (mg) / P (mg)			1,98
Non-Protein Kalori			36,36 kcal
Nitrojen			0,48 gr
Non-Protein Kalori / Nitrojen			75,75

Order Hazırlama Çarpanı 1,25 - Toplam Solüsyon 110,00 137,40  
Dekstroz: 1,62 (mg/kg/dk)

# DAILY ORDER TRANSACTIONS SCREEN

- In the daily order transactions window, orders are displayed with symbols, in draft, waiting for filling, and filled options.
- By adjusting the date from the top right corner, past fillings can be checked.

Order Tarihi	Orday Tarihi	Dolum Tarihi	Doktor	Bebegin Adı Soyadı	Toplam Stok (ml)	Dolacak (Gr)	Dolan (Gr)	Hata Oran(%)	İlaç Adı	Kullanılan Miktar
07.10.2025 10:10:35			Kazım DARKA	BEBEK GENÇ 1	257,30	0,00	0,00	0,00	Orinlec 1,20	8,60
07.10.2025 10:12:09	07.10.2025 10:12:13		Kazım DARKA	BEBEK KAPLAN 2	178,70	0,00	0,00	0,00	Potasyum Klorür 1,75	1,72
07.10.2025 10:10:59	07.10.2025 10:11:07		Kazım DARKA	BEBEK KAPLAN 1	209,60	0,00	0,00	0,00	Cemevit	0,17
07.10.2025 10:03:24	07.10.2025 10:03:30		Kazım DARKA	BEBEK EKİNCİ	525,70	0,00	0,00	0,00	1,3 NaCl	13,72
06.10.2025 12:52:28	06.10.2025 12:52:39	06.10.2025 15:35:19	Kazım DARKA	BEBEK ÇAĞLAYAN	466,50	483,43	456,10	-5,65	1,10 Pimene	51,40
06.10.2025 12:53:37	06.10.2025 12:53:42	06.10.2025 15:32:05	Kazım DARKA	BEBEK EKİNCİ	439,90	456,78	436,70	-5,02	Debrez 1,20	55,39
06.10.2025 12:55:57	06.10.2025 12:56:04	06.10.2025 15:24:38	Kazım DARKA	BEBEK GENÇ 1	277,80	276,97	269,80	-2,59	Debrez 1,5	74,80
06.10.2025 12:54:37	06.10.2025 12:54:43	06.10.2025 15:15:29	Kazım DARKA	BEBEK KAPLAN 1	206,50	197,86	188,00	-4,98		
06.10.2025 12:55:10	06.10.2025 12:55:15	06.10.2025 15:11:48	Kazım DARKA	BEBEK KAPLAN 2	176,40	169,01	161,80	-4,27		

Toplam Order: 9 Onaylanmış Order: 3 Doldurulmuş Order: 5

Sayfa Yenile

# DOCTOR MEDICATION SORTING SCREEN

- Different medications used by doctors and hospitals can be sorted according to preference, and items can be added or removed in the order entry window.

Hastane:  Doktor:

SN	Grup Adı	İlaç Adı	Birimi
1	Dekstroz	Dekstroz %50	g
2	Diğer Vitamin ve Cametin	B-Vit	ml
3	Diğer Vitamin ve Cametin	C-Vit	ml
4	Diğer Vitamin ve Cametin	Lecanatin	ml
5	Diğer Vitamin ve Cametin	Solvit	ml
6	Diğer Vitamin ve Cametin	Vitalpid İnfant	ml
7	Diatile Su	Diatile Su	ml
8	Glycophos	Glycophos (P için)	ml
9	izodex	izodex 1/3	ml
10	Lipid	Omegaven %10	g
11	Lipid	Seoflipid %20	g
12	Protein	Dipeptivon (glutamin)	g
13	Protein	Freamine %10	g
14	Protein	Freamine %8.5	g
15	Protein	Hepatin	Unit
16	Protein	Hepaselamin %8	g
17	Protein	Neframin % 5.6	g
18	Protein	Trophamine %6	g
19	Sodyum	%0.9 NaCl	mEq
20	Sodyum	%5.6 NaCl	ml
21	Sodyum	Serum Sale	mEq
22	Sodyum	Sodyum Bikarbonat % 8.4	mEq


Ekle

Çıkar

SN	Grup Adı	İlaç Adı	Birimi
1	Protein	%10 Primene	g
2	Lipid	Cinoleic %20	g
3	Dekstroz	Dekstroz %5	g
4	Dekstroz	Dekstroz %10	g
5	Dekstroz	Dekstroz %20	g
6	Potasyum	Potasyum Klorür %7.5	mEq
7	Kalsiyum	Calcium Picken %10	ml
8	Sodyum	%3 NaCl	mEq
9	Magnezyum	Magnezyum Sülfat %15	ml
10	Diğer Vitamin ve Cametin	Comerit	ml
11	Tracutıl	Tracutıl	ml
12	Potasyum	Potasyum Fosfat	mEq
13	Dekstroz	Dekstroz %30	g

# MEDICATION DEFINITION SCREEN

- Changes such as medication group modifications, medication manufacturer changes, or quantity adjustments can be made.

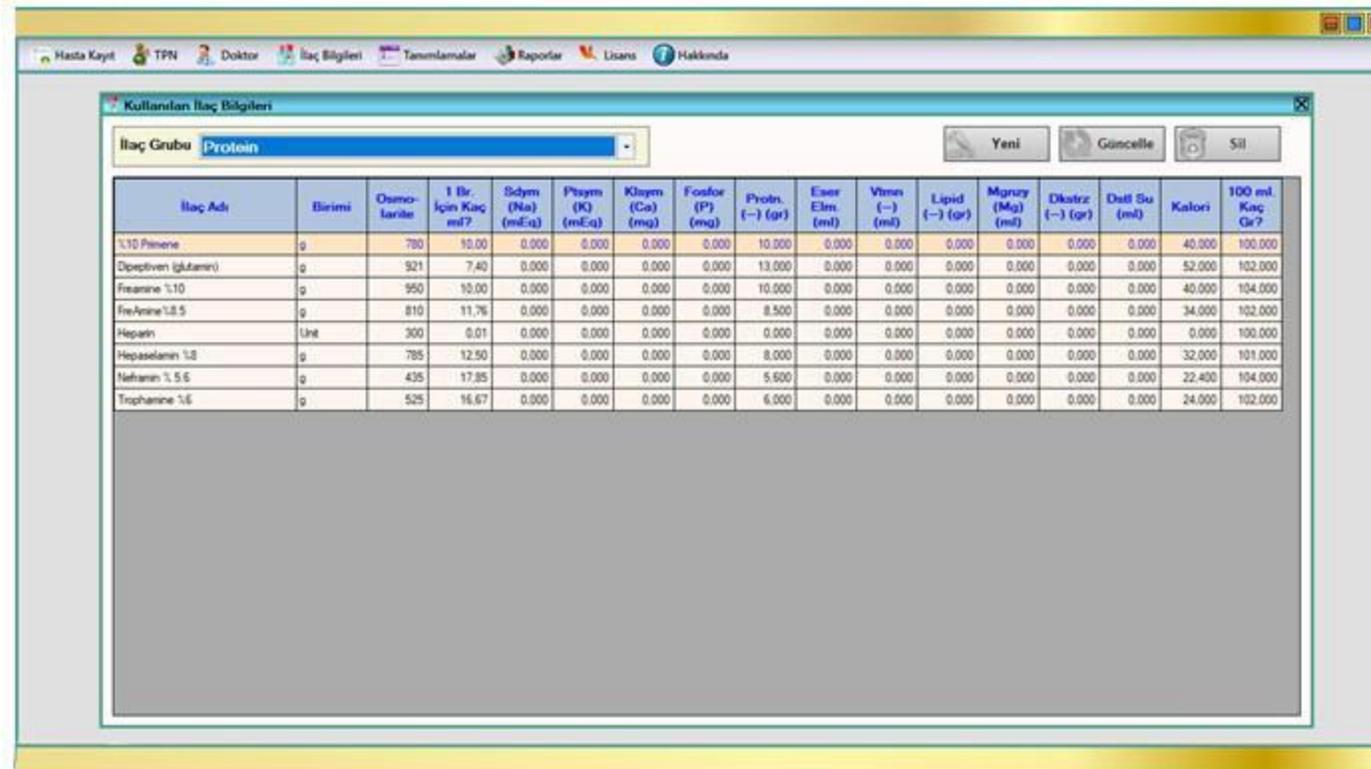

The screenshot shows a software window titled "Kullanılan İlaç Bilgileri" (Used Medication Information). The window has a menu bar with options: Hasta Kayıt, TPN, Doktor, İlaç Bilgileri, Tanımlamalar, Raporlar, Lisans, and Hakkında. Below the menu bar, there is a dropdown menu for "İlaç Grubu" (Medication Group) set to "Protein". To the right of the dropdown are three buttons: "Yeni" (New), "Guncelle" (Update), and "Sil" (Delete). The main area contains a table with the following columns: İlaç Adı, Birimi, Osmolarite, 1 İbr. İçin Kaç ml?, Sdym (Na) (mEq), Potasyum (K) (mEq), Kalsiyum (Ca) (mg), Fosfor (P) (mg), Protein (-) (gr), Enerji Elm. (ml), Vitamin (-) (ml), Lipid (-) (gr), Magnezyum (Mg) (mg), Dişiz (-) (gr), Distil Su (ml), Kalori, and 100 ml. Kaç Gr?. The table lists several medications with their respective values for these parameters.

İlaç Adı	Birimi	Osmolarite	1 İbr. İçin Kaç ml?	Sdym (Na) (mEq)	Potasyum (K) (mEq)	Kalsiyum (Ca) (mg)	Fosfor (P) (mg)	Protein (-) (gr)	Enerji Elm. (ml)	Vitamin (-) (ml)	Lipid (-) (gr)	Magnezyum (Mg) (mg)	Dişiz (-) (gr)	Distil Su (ml)	Kalori	100 ml. Kaç Gr?
1%10 Fenene	g	780	10,00	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,000	100,000
Dipektiven (glutamin)	g	921	7,40	0,000	0,000	0,000	0,000	13,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	52,000	102,000
Freamine 1%10	g	950	10,00	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,000	104,000
Fre-Amine 1%1,5	g	810	11,76	0,000	0,000	0,000	0,000	8,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,000	102,000
Hepatin	litr	300	0,01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000
Hepaselamin 1%1	g	785	12,50	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	32,000	101,000
Nefamin 1%1,5	g	435	17,85	0,000	0,000	0,000	0,000	5,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,400	104,000
Trophanne 1%1	g	525	16,67	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,000	102,000

# USER DEFINITION SCREEN

- Users with different roles, such as doctors, pharmacists, nurses, etc., can be defined in any number.

Hastane: [Dropdown]

Yeni Kaydet İptal

Kullanıcı Adı: Kazım DARKA Şifresi: \*\*\*\*

Kullanıcı Türü: Doktor

Yönetici  
Doktor  
Eczacı  
Hemşire

	Yetkisi	
Order Giriş - Ekranı Giriş Yetkisi	Var	-
Order Dolum - Ekranı Giriş Yetkisi	Var	-
Bebek Bilgileri - Ekranı Giriş Yetkisi	Var	-
Bebek Bilgileri - Yeni Bebek Kaydetme Yetkisi	Var	-
Bebek Bilgileri - Bebek Bilgilerini Güncelleme Yetkisi	Var	-
Bebek Bilgileri - Kayıtlı Bebekleri Silme Yetkisi	Var	-
Otomatik Order - Ekranı Giriş Yetkisi	Var	-
Otomatik Order - Yeni Order Kaydetme Yetkisi	Var	-
Otomatik Order - Kayıtlı Order Bilgisini Silme Yetkisi	Var	-
Otomatik Order - Order Çıktısı Alma Yetkisi	Var	-
Otomatik Order - Order'a Dolum İçin Onay Verme Yetkisi	Var	-
Otomatik Order - Dolum Onayı Verilmiş Order'ı İptal Etme Yetkisi	Var	-
Otomatik Order - Order'ı Doldurulmuş Hale Getirme Yetkisi	Var	-
Manuel Order - Ekranı Giriş Yetkisi	Var	-
Manuel Order - Yeni Order Kaydetme Yetkisi	Var	-
Günlük Order İşlemleri - Ekranı Giriş Yetkisi	Var	-
Günlük Order İşlemleri - Order'a Dolum İçin Onay Verme Yetkisi	Var	-
Günlük Order İşlemleri - Dolum Onayı Verilmiş Order'ı İptal EL...	Var	-
TPN İlac Dolum Sıralaması - Ekranı Giriş Yetkisi	Var	-

# USER REPORTING SCREEN

- The activities of those who carry out the filling process can be tracked.
- All actions of users in the application are recorded and can be reviewed when needed.

Order Tarihi	Onay Tarihi	Dolum Tarihi	Bebeğin Adı Soyadı	Onaylayan	Dolduran
06.10.2025 12:52:28	06.10.2025 12:52:39	06.10.2025 15:35:19	BEBEK ÇAĞLAYAN	Kazım DARKA	Merve SAVAŞ
06.10.2025 12:53:37	06.10.2025 12:53:42	06.10.2025 15:32:05	BEBEK EKİNCİ	Kazım DARKA	Merve SAVAŞ
06.10.2025 12:55:57	06.10.2025 12:56:04	06.10.2025 15:24:38	BEBEK GENÇ 1	Kazım DARKA	Merve SAVAŞ
06.10.2025 12:54:37	06.10.2025 12:54:43	06.10.2025 15:15:29	BEBEK KAPLAN 1	Kazım DARKA	Merve SAVAŞ
06.10.2025 12:55:10	06.10.2025 12:55:15	06.10.2025 15:11:48	BEBEK KAPLAN 2	Kazım DARKA	Merve SAVAŞ

Toplam Order 5 Onaylanmış Order 0 Doldurulmuş Order 5

Sayfa Yenile